

English

Please read this leaflet carefully before use.

YES® VM

YES® VM water-based organic Vaginal Moisturising gel uses a patented technology to provide natural, long-lasting moisture to dry vaginal mucosa.

YES® VM is available in 100ml tubes and packs of pre-filled applicators.

•When menopausal estrogen depletion causes itching, burning and irritation of the dry vaginal tissues, YES® VM gives effective, fast and long-lasting relief, and restores intimate comfort.

•YES® VM uses bio-adhesive plant polymers which adhere to the vaginal walls and provide prolonged hydration for up to 3 days.

•Case studies show that YES® VM is fast-acting and long-lasting while replenishing intimate moisture safely and naturally.

Provides symptomatic relief from:

- Vaginal dryness
- Menopausal Vaginal Atrophy
- Itching
- Irritation, burning and soreness
- Dyspareunia.

Temporary vaginal dryness can have various origins: after childbirth, when breastfeeding, and when taking oral contraceptives. Certain anti-depressants and anti-histamines can cause intimate dryness, as can extreme stress.

YES® VM is:

- A soft, clear bio-adhesive gel
- Discreet no smell, taste, colour, stickiness or fallout. Close to the texture and feel of a woman's own lubrication
- pH matched to restore and stabilise the protective acidity of the intimate environment, supporting vaginal health
- Hormone-free
- Free from known mucosal irritants, and ingredients such as glycerine, petroleum products, parabens (hormone mimics) which can disrupt or compromise intimate health
- Gentle and natural, for even the most sensitive conditions
- Guaranteed purity through its certified organic status
- Safe for use with latex and polyisoprene condoms
- Trusted by Health Care Professionals and women to bring soothing, safe and welcome relief to the debilitating symptoms of menopausal dryness
- A non-hormonal natural alternative to synthetic chemical intimate moisturisers.

When cancer treatment (surgery or chemotherapy) has resulted in vaginal dryness, YES® VM is safe for hormone sensitive conditions, and successfully moisturises delicate or traumatised intimate tissues. YES® VM is also suitable for use with dilators, whether or not these are part of a cancer recovery programme.

Directions for use – YES® VM in 100ml tube

This product is a soft clear gel, easy to dispense and distribute, and is designed for finger application, which allows you to decide how much you want to put where. Simply squeeze the soft gel on to your hand and use your finger tips to apply the desired amount to the vaginal tissues. YES® VM may also be used to moisturise the labia. (No applicator included)

YES VM® – frequency of use

A 5ml application used every 2–3 days, is typically sufficient to maintain a moist, comfortable vagina.

Provides intimate moisture for up to three days in typical cases of vaginal atrophy.

Cases of severe dryness will benefit from more frequent use (1 application every 1–2 days) initially until improvement is gained.

If using to alleviate painful sex, apply as required before intercourse and to ensure comfort afterwards.

Iso-tonic*: the iso-tonic/iso-osmotic nature of YES® VM is carefully matched to human tissues.

Why is this balance important? Products which are hyper-tonic (often containing chemicals such as glycerine and glycols) can cause irritation to intimate tissues.

By being iso-tonic/iso-osmotic*, YES® VM protects against such irritation.

*for more information, see website

NB YES® VM is not suitable for use with the ThinPrep Pap smear test (see website)

Ingredients

Water, Flax extract*, Aloe vera*, Locust bean gum*, Guar gum*, Sodium chloride, Xanthan gum, Potassium sorbate, Citric acid, Phenoxethanol.

* Organically grown ingredients. 95% organic. Protected by International Patents.

Storage: Replace cap when not in use. Store in a cool dry place between 5+30°C. Use before expiry date. Keep out of direct sunlight.

Caution: This device is not a contraceptive or a spermicide.

Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use and seek medical advice. YES® VM is not compatible with Polyurethane condoms.

Why certified organic?

When you buy something that is certified organic, not only are you making the best choice for your own wellbeing, your purchase is also supporting a system that respects human health, animals, wildlife and the environment. Certified organic products meet stringent standards and organic certification is your assurance that our ingredients and products have been grown and processed according to strict procedures. Production, processing, distribution and sales are monitored to maintain the finest organic and ecological integrity.

Packaging and recycling

YES® aims to minimise the environmental impacts of all our packaging. So please do help us achieve that aim. All our bottles are Polyethylene which is the most is the most widely accepted plastic by recycling centres. The cartons, boxes and package inserts can all be recycled.

100% Guarantee: YES® products are 100% satisfaction guaranteed. Please contact us by phone or email if you have any concerns or questions about this guarantee.


Certified Organic by: The Soil Association, Bristol, UK.

Approved by: The Vegetarian Society.


Directions for use – YES® VM in pre-filled Applicators

When you want to reach higher in the vagina, this product offers you a discreet and convenient way to deliver lubrication and moisture in the right amount to the source of discomfort.


1 Shake down the applicator

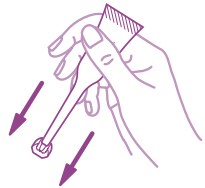

2 Twist off the top

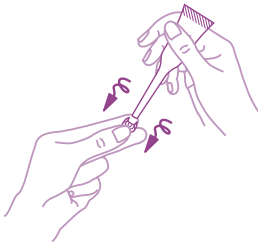

3 The applicator can be inserted from three different positions, according to personal ease and preference:

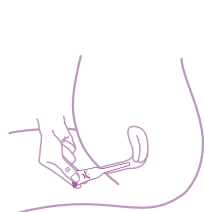


a) How to insert the applicator when sitting




b) How to insert the applicator when standing



c) How to insert the applicator when lying

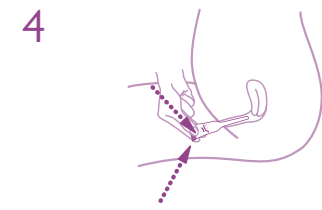

When inserted, squeeze the end of the applicator several times to release product high into the vagina

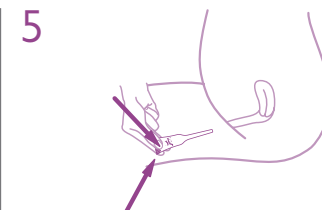

When emptied, squeeze the end of the applicator to withdraw it safely. Do not re-use – Risk of Contamination.



Please dispose of the applicator tube and top by recycling

BG Български

YES® VM – вагинален овлажнител с продължително действие

Описание на продукта

YES® VM е органичен вагинален овлажняващ гел на водна основа, който използва патентована технология за осигуряване на естествена, дълготрайна влага на сухата вагинална лигавица.

Указания за употреба – YES® VM в тубичка от 100 ml

YES® VM в тубичка е предназначен за нанасяне с прсти, като просто изстискате нежния гел върху ръката си и с върховете на прстите нанесете желаното количество върху вагиналните тъкани. YES® VM може да се използва и за овлажняване на срамните устни. (Не е включен апликатор)

Указания за употреба – YES® VM в апликатори

1. Разклатете съдържанието на тубичката
2. Махнете горната част чрез завъртане
3. Апликаторът може да се вкара във влагалището в седяща, стояща или лежача позиция според личните предпочитания
4. След като го вкарате, стиснете края на апликатора няколко пъти, за да освободите продукта дълбоко във влагалището
5. Когато апликаторът се изпразни, продамкете да стискате края му, за да го изгледите безопасно. Да не се използва повторно – риск от замърсяване
6. Моля, изхвърлете тубичката и горната част на апликатора за рециклиране

YES® VM – честота на употреба

Приложение на 5 ml, използвано на всеки 2 – 3 дни, обикновено е достатъчно за поддържане на овлажнено влагалище без дискомфорт.

Осигурява интимно овлажняване до три дни при типичните случаи на вагинална атрофия. При случаи на тежка сухота от поза ще бъде първоначалната по-честа употреба (1 приложение на всеки 1 – 2 дни) до постигане на подобрение.

Забележка

Не е подходящо YES® VM да се употребява с ThinPrep Pap теста (цитонамазка) (вижте уеб сайта).

Внимание: YES® VM не е контрацептив или спермицид.

Предупреждение: Ако уплътнението на някоя тубичка или приложен апликатор е повредено или отворено, НЕ използвайте и върнете на мястото на покупка. Ако се появи дразнене или дискомфорт, прекратете употребата. Ако симптомите продължат, потърсете медицинска помощ. YES® VM не е съвместим с полиуретанови презервативи.

HR Hrvatski

YES® VM – Dugotrajna vaginalna hidratantna krema

Opis proizvoda

YES® VM organski vaginalni hidratantni gel na bazi vode koristi patentiranu tehnologiju za osiguravanje prirodne, dugotrajne vlage za isušivanje sluznice rodnice.

Upute za uporabu – YES® VM u tubi od 100 ml

YES® VM u tubi dizajniran je za nanošenje prstima, jednostavno stisnete mekani gel na ruku i vrhovima prstiju nanosite željenu količinu na vaginalna tkiva. YES® VM može se koristiti i za vlaženje stidnih usana. (Nije uključen aplikator)

Upute za uporabu – YES® VM u aplikatorima

1. Protesite sadržaj tube
2. Uvijte vrh
3. Aplikator se može umetnuti u rodnicu kada sjedite, stojite ili ležite, prema osobnim željama
4. Nakon umetanja, nekoliko puta stisnite kraj aplikatora kako bi se proizvod pustio visoko u rodnicu
5. Kada se isprazni, nastavite stiskati kraj aplikatora kako biste ga sigurno povukli. Ne upotrebljavati ponovno – postoji rizik od onečišćenja
6. Odložite tubu i gornji dio aplikatora recikliranjem

YES® VM – učestalost korištenja

Primjena od 5 ml koja se koristi svaka 2-3 dana obično je dovoljna za održavanje vlažne i ugodne rodnice.

Pružat intimnu hidrantnost do tri dana u tipičnim slučajevima vaginalne atrofije. Slučajevi jake suhoće imat će koristi od češće uporabe (1 nanos svaka 1-2 dana) u početku dok se ne postigne poboljšanje.

NAPOMENA: YES® VM nije prikladan za upotrebu s Papa-testom ThinPrep (vidi web-stranicu).

Opaz:

YES® VM nije kontracepcija ili spermicid.

Upozorenje:

Ako je brtva na bilo kojoj zatvorenoj tubi / aplikatoru oštećena ili otvorena, NE koristite, vratite na mjesto kupnje. Ako se pojave iritacija ili nelagodna, prekinite uporabu. Ako simptomi potraju potražite savjet liječnika. YES® VM nije kompatibilan s poluretanskim kondomima.

CZ Čeština

YES® VM – Dlouhotrvající vaginální zvlhčovač

Popis výrobku

Organický vaginální zvlhčovač YES® VM na bázi vody využívá patentovanou technologii k zajištění přírodního a dlouhotrvajícího zvlhčení suché vaginální sliznice.

Pokyny pro použití – YES® VM v 100ml tubě

YES® VM v tubě je určen k nanášení prsty, jednoduše vymačknete gel do dlaně a prsty naneste požadované množství na vaginální tkáň. YES® VM lze také použít ke zvlhčení stydkých pysků. (Aplikátor není součástí)

Pokyny pro použití – YES® VM v aplikátorech

1. Zašroubujte vršek
2. Odšroubujte vršek
3. Aplikátor je možné zasunout do vagíny vsedě, vstoje i vleže, jakkoli chcete.
4. Po zasunutí několikrát zmáčknete konec aplikátoru, aby se přípravek dostal do vagíny dostatečně hluboko
5. Po vyprázdnění držte konec aplikátoru zmáčknutý, abyste jej mohli bezpečně vytáhnout. Nepoužívejte opakovaně – nebezpečí kontaminace
6. Tubu aplikátoru a vršek likvidujte do tříděného odpadu.

YES® VM – četnost použití

Použití 5 ml přípravku co 2-3 dny obvykle stačí k zachování zvlhčujícího účinku a pohody.

U obvyklých případů vaginální atrofie zajišťuje zvlhčení intimních partií až po dobu 3 dnů. U případů závažné suchosti je používání z počátku čtenější (1 použití co 1-2 dny), dokud nedojde ke zlepšení.

Pozn. YES® VM je nevhodné pro použití s pap testem ThinPrep (viz webové stránky).

Varování: YES® VM nemá antikoncepční ani spermicidní účinek.

Upozornění: Pokud je uzávek na tubě/aplikátoru poškozen nebo otevřen, výrobek NEPOUŽÍVEJTE a vraťte jej v místě nákupu. Pokud dojde k podráždění nebo nepříjemné reakci, přestaňte přípravek používat. Pokud příznaky přetrvávají, vyhleďte lékařskou pomoc. YES® VM není kompatibilní s polyuretanovými kondomy.

DK Dansk

YES® VM – Langvarig vaginal fugtighedscreme

Den vandbaserede økologiske vaginale fugtighedscreme YES® VM bruger en patenteret teknologi til at give naturlig, langvarig fugt til tørre vaginale slimhinder.

Brugsanvisning – YES® VM i tube med 100 ml

YES® VM på tube er designet til påføring med fingrene. Du skal blot presse den bløde gel ud på din hånd og bruge fingerspidserne til at påføre den ønskede mængde på det vaginale væv.

YES® VM kan også bruges til at fugte labia. (Ingen aplikator inkluderet)

Brugsanvisning – YES® VM i aplikatorer

1. Ryst tubens indhold ned
2. Skru låget af
3. Aplikatoren kan indsættes i vagina siddende, stående eller liggende, alt efter personlig præference
4. Når den er indsat, skal du klemme på enden af aplikatoren flere gange for at frigive produktet højt op i skeden
5. Når den er tom, skal du fortsætte med at klemme på enden af aplikatoren for at trække den sikkert ud. Genbrug ikke – risiko for kontaminering
6. Bortskaf applikatorrøret og låget til genbrug

YES® VM – brugsfrequentens

En applikation på 5 ml hver 2-3. dag er typisk tilstrækkelig til at opretholde en fugtig, komfortabel vagina.

Giver intim fugt i op til tre dage ved typiske tilfælde af vaginal atrofi. Tilfælde af svær tørhed vil drage fordel af hyppigere brug (1 påføring hver til hveranden dag), indtil tilstanden forbedres.

Bemærk: YES® VM er ikke egnet til brug med ThinPrep-celleprøven (se webstedet).

Forsigtig:

YES® VM er ikke et svangerskabsforebyggende middel eller et saeddræbende middel.

Advarsel: Hvis forseglingen på en emballeret tube/applikator er beskadiget eller åbnet, må den IKKE bruges. Returner den til købsstedet.

Hvis der opstår irritation eller ubehag, skal du afbryde brugen. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. YES® VM er ikke kompatibel med polyuretankondomer.

NL Nederlands

YES® VM – Langhoudende vaginale moisturiser

Productbeschrijving

YES® VM organisch vaginale moisturising gel op waterbasis maakt gebruik van een gepatenteerde technologie voor een langdurige hydratatie van droge vaginale slijmvliezen.

Gebruiksaanwijzing – YES® VM in tube van 100 ml

YES® VM in een tube is ontwikkeld voor aanbrengen met de vingers. Knijp de zachte gel op uw hand en gebruik uw vingertoppen om de gewenste hoeveelheid aan te brengen op de vaginale slijmvliezen. YES® VM kan ook gebruikt worden voor het hydrateren van de schaamlippen. (Geen applicator meegeleverd)

Gebruiksaanwijzing – YES® VM in applicator

1. Schud de tube
2. Draai de dop eraf
3. De applicator kan zittend, staand of liggend in de vagina ingebracht worden, naar persoonlijke wens
4. Knijp na inbrengen enkele malen in het uiteinde van de applicator om het product hoog in de vagina in te brengen
5. Blijf als de applicator leeg is het uiteinde van de applicator inknijpen om hem veilig uit te nemen. Niet hergebruiken – Risico op besmetting
6. Werp de applicator tube en dop weg bij het recyclebaar afval

YES® VM – gebruiksfrequentie

Normaal gesproken is het aanbrengen van 5 ml per 2 tot 3 dagen voldoende voor een vochtige, comfortabel aanvoelende vagina.

Zorgt tot drie dagen voor intieme vochtigheid in de meeste gevallen van vaginale atrofie. Bij ernstige droogte is in eerste instantie een frequenter gebruik aan te raden (1 applicatie per 1 – 2 dagen) tot verbetering opgemerkt wordt.

NB YES® VM is niet geschikt voor gebruik met het ThinPrep-uitstrijkje (zie website).

Waarschuwing:

YES® VM is geen voorbehoedsmiddel of spermicide.

Waarschuwing:

Als het zegel op een tube/applikator beschadigd of geopend is, GEBRUIK hem dan niet maar retourneer hem naar de plek van aankoop. Gebruik stoppen als irritatie of ongemak optreedt. Indien de symptomen aanhouden, medische hulp inroepen. YES® VM is niet geschikt voor gebruik bij polyurethaan condooms.

EE Eesti

YES® VM – kauakestev tupeniisutaja Toote kirjeldus

YES® VM veepõhine orgaaniline tupeniisutaja-gel kasutab patenteeritud tehnoloogiat, et tagada tupe limaskestal looduslik, kauakestev niiskus.

Kasutusjuhised – YES® VM 100ml tuubis

YES® VM tuubis on mõeldud sõrmega pealekandamiseks. Pigistage pehme gel lihtsalt oma käele ja kandke sõrmeotstega tupekoole sobiv kogust. YES® VM-i võib kasutada ka habememokkade niisutamiseks. (Aplikaatorit pole komplektis)

Kasutusjuhised – YES® VM aplikaatoris

1. Raputage tuubi sisu alla
2. Keerake ülaosa maha
3. Aplikaatori saab sisestada tuppe istudes, seistes või lamades vastavalt isiklikele eelistustele
4. Pärast sisestamist pigistage aplikaatori otsa mitu korda, et toode vabaneks tuppe
5. Pärast tühiendamist jätkake aplikaatori otsa pigistamist, et see ohutult välja tõmmata. Ärge korduskasutage – saastumise oht
6. Kõrvaldage aplikaatori tuub ja ülaosa kasutuselt

YES® VM – kasutamise sagedus

Tavaliselt piisab tupe niiskuse ja mugavuse säilitamiseks 5 ml ainekst iga 2–3 päeva tagant. Tagab tüüpilistel juhtudel tupe atroofia ilmiise niiskuse kuni kolmeks päevaks. Tõsise kuivuse korral on kasulik sagedasem kasutamine (1 kord 1–2 päeva tagant) esialgu kuni paranemiseni.

NB. YES® VM ei sobi ThinPrep Pap-testiga kasutamiseks (vt veebisaiti).

Hoiatus: YES® VM ei ole rasedustamisvastane vahend ega spermitsiid.

Hoiatus: Kui suletud tuub/aplikaator on kahjustatud või avatud, ÄRGE kasutage seda ja tagastage ostukohta. Ärriituse või ebamugavuse ilmnemisel lõpetage kasutamine. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole. YES® VM ei sobi poliureetaankondoomidega.

FI Suomi

YES® VM – Pitkäkestoinen emättimen kostutin

Toustuen kuvaus

YES® VM vesipohjaisessa emättimen kosteutusgeelissä käytetään patentoitua tekniikkaa emättimen luonnollisen, pitkäkestoisien kosteutuksen luomiseksi.

Käyttöohjeet – YES® VM 100 ml:n putkiossa

YES® VM putkiossa on suunniteltu sormilla levitettäväksi. Puriesta yksinkertaisesti pehmeää geeliä kätseesi ja levitä haluamasi määrä sormenpäällä emättimen kudoksiin. YES® VM:tä voi käyttää myös häpyhuulin. (Levitin ei sisällä)

Käyttöohjeet – YES® VM levittimisissä

1. Ravista putkion sisältöä.
2. Kierrä yläosa pois
3. Levitin voidaan asettaa emättimen sisään istuma-, seisoma- tai makuaasennossa henkilökohtaisen mieltymyksen mukaisesti
4. Kun levitin on emättimessä, vapautu tuotetta korkealle emättimen puristamalla levittintä useita kertoja
5. Kun levitin on tyhjä, purista sen päätä, niin voit vetää sen turvallisesti emättimestä. Älä käytä uudelleen – Saastumisvaara
6. Hävitä levitinputkilo ja yläosa kierrätykseen

YES® VM – käyttötiheys

Tavallisesti emätin pysyy miellyttävän kosteana, jos kostuttavaa geeliä levitetään 5 ml 2-3 päivän välein.

Tarjoa intiimiä kosteutusta jopa kolmen päivän ajan tyydyttäväksi emättimen atrofiatapauksissa. Jos emätin on äärimmäisen kuiva, kostuttavaa geeliä kannattaa käyttää useammin (1-2 päivän välein).

Huom. YES® VM ei sovellu käytettäväksi ThinPrep-nestepapamennelän kanssa (katso verkkosivusto).

Huomio: YES® VM ei ole ehkäisyväline tai ehkäisygeeli.

Varoitus: Jos tiiviste putkiossa tai levittimisissä on vaurioitunut tai avattu, ÄLÄ käytä sitä vaan palauta ostopaikkaan. Lopeta käyttö, jos ilmenee ärsytystä tai epämieluisuutta. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin. YES® VM ei ole yhteensopiva polyuretaanikondomien kanssa.

The YES® bestsellers

See yesyesyes.org for our full collection of natural and organic intimate products



YES® WB

Is a water-based, personal lubricant. This luxurious silky gel is non-sticky, odour and taste-free and feels like natural lubrication. It is pH matched to vaginal pH. Matching vaginal pH may help protect against bacterial and yeast infections. Compatible with natural rubber latex and polyisoprene condoms.

YES® OB

Is a plant-oil based, longer-lasting lubricant and intense hypoallergenic moisturiser and massage oil, which is soothing and richly emollient to nourish delicate intimate tissues. Not condom compatible.



YES® VM

(Vaginal Moisturiser) Is a long-lasting natural vaginal moisturising gel perfect for regular/daily use. It is designed to revitalise and hydrate to relieve vaginal dryness and discomfort. YES® VM is compatible with natural rubber latex and polyisoprene condoms.

YES® CLEANSE

Two natural intimate washes, one rose scented, one fragrance-free, which are sensitively formulated to respect the intimate ecology, with an effective and refreshing foam cleansing action. Each bottle contains over 200 applications.



YES® VM



YES®

YES

Manufactured in Great Britain

The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road, Greattham, Liss, Hampshire, GU33 6HG, United Kingdom.

www.yesyesyes.org
For USA please visit AHYES.org

hello@yesyesyes.org

UK:
03450 941141
0800 978 8525

FR Français

YES® VM – Gel hydratant vaginal longue durée

Description du produit

Le gel hydratant vaginal biologique à base d'eau YES® VM utilise une technologie brevetée pour fournir une hydratation naturelle et durable aux muqueuses vaginales sèches.

Mode d'emploi – YES® VM en tube de 100 ml

YES® VM en tube est conçu pour une application au doigt, il suffit de presser une noisette de gel sur votre main et d'utiliser vos doigts pour appliquer la quantité désirée sur les tissus vaginaux. YES® VM peut également être utilisé pour hydrater les lèvres. (Aucun applicateur inclus)

Mode d'emploi – YES® VM en applicateur

- Secouez le contenu du tube
- Tordez le col du tube
- L'aplicateur peut être inséré dans le vagin en position assise, debout ou couchée, selon les préférences personnelles
- Une fois inséré, pressez l'extrémité de l'applicateur plusieurs fois pour libérer le produit au fond du vagin

- Une fois vide, continuez à presser l'extrémité de l'applicateur afin de le retirer en toute sécurité. Ne pas réutiliser – Risque de contamination

- Veillez recycler le tube et le col de l'applicateur

YES® VM – fréquence d'utilisation

Une application de 5 ml tous les 2 à 3 jours est généralement suffisante pour maintenir un vagin humide et confortable.

Fournit une hydratation intime jusqu'à trois jours dans les cas typiques d'atrophie vaginale. Les cas de sécheresse sévère bénéficieront d'une utilisation plus fréquente (1 application tous les 1 à 2 jours) dans un premier temps jusqu'à ce qu'une amélioration soit obtenue.

N.B. YES® VM ne convient pas pour une utilisation avec les tests de froth ThinPrep Pap (voir site Web).

Attention : YES® VM n'est ni un contraceptif ni un spermicide.

Avertissement : Si le sceau de l'un des tubes / applicateurs inclus est endommagé ou ouvert, NE PAS utiliser, retourner au lieu d'achat. En cas d'irritation ou d'inconfort, cessez l'utilisation. Si les troubles persistent, consultez un médecin. YES® VM n'est pas compatible avec les préservatifs en polyuréthane.

DE Deutsch

YES® VM – Vaginale Feuchtigkeitscreme mit langwirksamer Wirkung

Produktbeschreibung

Das organische vaginale Feuchtigkeitsgel YES® VM auf Wasserbasis nutzt eine patentierte Technologie, um trockene Vaginalschleimhaut natürlich und langanhaltend mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Gebrauchsanweisung – YES® VM in 100-ml-Tube

YES® VM in der Tube wurde für die Anwendung mit dem Finger entwickelt. Drücken Sie das weiche Gel einfach auf Ihre Hand und tragen Sie die gewünschte Menge mit den Fingerspitzen auf das Vaginalgewebe auf. YES® VM kann auch zur Befuchtung der Schamlippen verwendet werden. (Applikator nicht inbegriffen)

Gebrauchsanweisung – YES® VM in Applikatoren

- Schütteln Sie den Inhalt der Tube nach unten
- Schrauben Sie die Oberseite ab
- Der Applikator kann je nach persönlicher Vorliebe im Sitzen, Stehen oder Liegen in die Vagina eingeführt werden
- Drücken Sie nach dem Einführen mehrmals auf das Ende des Applikators, um das Produkt hoch in der Vagina freizusetzen
- Drücken Sie nach dem Entleeren das Ende des Applikators weiter zusammen, um ihn sicher herauszuziehen. Nicht wiederverwenden – Kontaminationsgefahr
- Bitte entsorgen Sie die Applikortube und den Deckel im Recycling

YES® VM – Nutzungshäufigkeit

Eine Anwendung von 5 ml alle 2–3 Tage ist in der Regel ausreichend, um die Vagina auf eine angenehme Weise mit Feuchtigkeit zu versorgen.

Versorgt den Intimbereich bis zu drei Tage lang mit Feuchtigkeit in typischen Fällen von Vaginalatrophie. Bei starker Trockenheit ist eine anfänglich häufigere Anwendung (1 Anwendung alle 1–2 Tage) sinnvoll, bis eine Besserung eintritt.

Hinweis: YES® VM ist nicht für die Verwendung mit dem ThinPrep-Abstrichtest geeignet (siehe Website).

Achtung: YES® VM ist kein Verhütungsmittel oder Spermizid.

Warnung: Wenn die Versiegelung einer mitgelieferten Tube/eines mitgelieferten Applikators beschädigt ist oder geöffnet wurden, verwenden Sie das Produkt nicht und bringen Sie es zurück in die Verkaufsstelle. Wenn Reizungen oder Beschwerden auftreten, stellen Sie die Verwendung ein. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf. YES® VM ist nicht mit Polyurethan-Kondomen kompatibel.

GR Ελληνικά

YES® VM – Προϊόν κολλικής ενυδάτωσης διαρκείας Περιγραφή προϊόντος

Το οργανικό τζελ κολλικής ενυδάτωσης με βάση το νερό YES® VM χρησιμοποιεί μια κατοχυρωμένη τεχνολογία που παρέχει φυσική ενυδάτωση διαρκείας στον κολλικό βλεννογόνο.

Οδηγίες χρήσης – YES® VM σε σωληνάριο 100ml

Το YES® VM σε σωληνάριο έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή με τα δάκτυλα. Πιέστε το σωληνάριο για να βγάλετε τη ποσότητα απαλού τζελ στο χέρι σας και με τις άκρες των δακτύλων σας απλώστε την επιθυμητή ποσότητα στους κολλικούς ιστούς. Το YES® VM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενυδάτωση και στα χείλη του αιδείου. (Δεν περιλαμβάνεται applicatép)

Οδηγίες χρήσης – YES® VM με applicatép

- Ανακινήστε το περιεχόμενο του σωληνάριου προς τα κάτω
- Περιστρέψτε το πώμα

- Μπορείτε να εφαρμόσετε το applicatép στον κόλπο σε καθιστή, όρθια ή ζαπλωτή θέση, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας

- Αφού το εφαρμόσετε, πιέστε το άκρο του applicatép αρκετές φορές ώστε να απορροβωθεί το προϊόν ψιλά μέσα στον κόλπο

- Αφού αδειάσει, συνεχίστε να πιέζετε το άκρο του για να το αφαιρέσετε με ασφάλεια. Μην επαναχρησιμοποιείται – Κίνδυνος μόλυνσης

- Απορρίψτε το σωληνάριο και το πώμα του applicatép στην ανακύκλωση

YES® VM – συχνότητα χρήσης

Εφαρμογή 5ml ανά 2–3 ημέρες επαρκεί συνήθως για άνετη ενυδάτωση.

Ενυδατώνει την ευαίσθητη περιοχή για έως και τρεις ημέρες στις συνήθεις περιπτώσεις κολλικής ατροφίας. Σε περιπτώσεις έντονων ξηρότητας η συχνότερη χρήση (1 εφαρμογή ανά 1-2 ημέρες) θα βοηθήσει αρχικά ώστε να επιτευχθεί βελτίωση.

ΣΗΜ. Το YES® VM δεν είναι κατάλληλο για χρήση με το τεστ Παπανικολάου υγιούς φάσης (ανατρέξτε στον ιστότοπο).

Επισημόσεις προσοχής: Το YES® VM δεν είναι αντισυλληπτικό ή σπερματοκτόνο.

Προειδοποίηση: Εάν το πώμα σε οποιοδήποτε σωληνάριο/ applicatép έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοίξει, ΜΗΝ το χρησιμοποιήσετε. Επιτρέψτε το στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε. Εάν υπάρξει ερεθισμός ή ενόχληση διακόψτε τη χρήση. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επισκεφθείτε γιατρό. Το YES® VM δεν είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών πολυουρεθάνης.

HU Magyar

YES® VM – Tartós hatású vaginális hidratáló A termék ismertetése

A YES® VM vizes alapú, biológianyagokból készült vaginális hidratáló szabadalmaztatott technológiával készül, amely természetes módon és hosszú időn keresztül hidratálja a vagina nyálkahártyáját.

Használati utasítás – YES® VM 100-ml-es tubusban

A YES® VM tubusos termékét úgy terveztük, hogy azt az ujjakkal lehessen felvinni. Egyszerűen nyomja a kívánt mennyiségű gélt az ujjbigyére, majd vigye fel a vagina szövetére. A YES® VM a szeméremajkak hidratálására is alkalmas. (A termék az applicátort nem tartalmazza)

Használati utasítás – YES® VM applicátorban

- Rázza le a tubus tartalmát
- Csavarja le a tetejét
- Az applicátort ülő, álló vagy fekvő helyzetben is be lehet helyezni, attól függően, ki melyik módszerrel részesíti előnyben
- A beillesztést követően nyomja meg néhányszor az applicátort, hogy a termék mélyen a vaginába jusshasson
- Ha kiürült, az applicátor biztonságos eltávolításához tartsa összenyomva az applicátor végét. Ne használja újból – Szennyeződésvészély
- Kérjük, hogy az applicátor tubusát és tetejét a szelektív hulladékgyűjtőbe dobja

YES® VM – alkalmazás gyakorisága

Az 5 ml-es termék 2-3 naponta történő használata általában elégendő ahhoz, hogy a vagina kelőően hidratált legyen és komfortos érzetet adjon.

A hüvelyi atrófia (hüvelyszékszáraz) típusú esetekben a termék akár három napon keresztül is képes biztosítani az intím területék nedvességertartalmát. Amennyiben súlyosabb szárazságról van szó, javasoljuk, hogy kezdetben gyakrabban használja a terméket (1-2 naponta egyszer) egészen addig, amíg a kívánt hatást el nem éri.

Megjegyzés: A YES® VM nem alkalmas a ThinPrep Pap kenetvizsgálattal való használatra (lásd a honlapot).

Figyelmeztetés: A YES® VM terméknek semmiféle fogamzásgátló vagy spermicid hatása nincs.

Vigyázat: Ha a tubuson/applicátoron látható zár sérült vagy nyitva van, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET, vigye vissza a vásárlás helyére.

Amennyiben irritációt vagy kellemetlen érzést tapasztal, ne használja a terméket. Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, keresse fel orvosát. A YES® VM termék nem kompatibilis a poliuretánból készült óvszerekkel.

IS Íslenska

YES® VM – Langvarandi rakakrem fyrir leggöng

Lýsing vöru

YES® VM lífrænt Vaginal Moisturizing gel sem er byggt á vatni notar tækni með einkaleyfi til að veita náttúrulegan, langvarandi raka í þurra slímhið legganga.

Notkunarleiðbeiningar – YES® VM í 100 ml túbú

YES® VM í túbú er hannað til þess að notað með fingrum, einfaldlega kreistu mjúka gellið á hendina á þér og notaðu fingurgömana til að bera eins mikið og þú vilt á leggöngin. YES® VM með einnig nota til að koma raka á skapavarinnar. (Enginn stjaka innifalinn)

Notkunarleiðbeiningar – YES® VM í stjökum

- Hristu innihaldið þúrnar niður.

- Snúðu lokinu af

- Hægt er að setja stjökuna inn í leggöngin þegar þú sítur, stendur eða liggur, efir persónulegu vali

- Þegar hún hefur verið sett inn, kreistu enda stjökunnar nokkrum sinnum til að losa vöruna hátt inn í leggöngin

- Þegar hún tóm skaltu halda áfram að kreista endann á stjökunni til að draga hana út á öruggan hátt. Ekki endurnota – Mengunarhætta

- Lúðu, útilíðjiæt aplikatora túbúruni og endanum með því að endurvinna þau

YES® VM – notkunartíðni

Að bera á 5ml í 2-3 daga fresti er venjulega nægjanlegt til að viðhalda rökum og þægilegum leggöngum.

Veitrir raka í allt að þrjú daga í dæmigerðum tilfelli um rýmun á leggöngum. Tilvik um alvarlegan þurrk munu njóta góðs af tíðri notkun (1 notkun á 1-2 daga fresti) upphaflega þar til árangri er náð. (Applikators nav ieklaugs)

ATH. YES® VM er ekki hentugt til notkunar með ThinPrep leggangastrokusyni (sjá vefsíðu).

Varið: YES® VM er ekki getnaðarvörn eða aðdrépanni.

Viðvörðun: Ef innisiglið á einhverri túbú/stjökú sem fylgir er skemmt eða ornað skaltu EKKI nota hana, heldur skla henni á aftur á kaupstað. Ef ertingur eða óþægindi koma fram skaltu hætta notkun. Leitaðu til læknis ef einhennin eru viðvarandi. YES® VM er ekki samhæft polyúretan smokkum.

IT Italiano

YES® VM – Idratante vaginale a lunga durata

Descrizione del prodotto

Il gel idratante vaginale YES® VM, biologico e a base di acqua, utilizza una tecnologia brevettata per garantire un'idratazione naturale e duratura in caso di secchezza della mucosa vaginale.

Istruzioni per l'uso – YES® VM in tubo da 100 ml

YES® VM in tubo è concepito per l'applicazione con le dita: basta premere il gel morbido sulla mano e usare la punta delle dita per applicare la quantità desiderata sui tessuti vaginali. YES® VM può anche essere utilizzato per idratare le labbra. (Applicatore non incluso)

LT Lietuvių

„YES® VM“ – Ilgalaisis makšties drėkiklis

Produktu aprašymas

„YES® VM“ organinis makšties drėkinamasis gelis vandens pagrindu naudoja patentuotą technologiją, kuri suteikia natūralią, ilgalaikę drėgmę išsaugėjusiai nurodies gleivinei.

Vartojimo nurodymai – „YES® VM“100 ml tubelėje

„YES® VM“ tubelėje, pritaikyta tepti gel pirštais, išspauskite minkštą gelį ant rankos ir pirštų galaukais užtepkite norimą kiekį til pafėros onskties madoje pa vaginaln vev. YES® VM kan ogsa brukes til a tilfore kjønssleppene fuktighet. (Applikator medfølger ikke)

Istruzioni per l'uso – YES® VM in applicatori

- Scuotere bene il contenuto del tubo
- SVitare la parte superiore
- L'applicatore può essere inserito nella vagina restando sedute, in piedi o stese, secondo la preferenza personale
- Dopo l'inserimento, premere l'estremità dell'applicatore varie volte per rilasciare il prodotto in alto nella vagina
- Quando è vuoto, continuare a premere l'estremità dell'applicatore per ritrarlo in modo sicuro. Non riutilizzare – Rischio di contaminazione
- Smaltire il tubo dell'applicatore e la parte superiore riciclandoli

YES® VM – frequenza d'uso

Un'applicazione di 5 ml da usare ogni 2–3 giorni di solito è sufficiente per mantenere una vagina idratata e in condizioni ottimali.

Garantisce un'idratazione intima fino a tre giorni nei casi tipici di atrofia vaginale. I casi di secchezza grave traggono beneficio da un uso più frequente (1 applicazione ogni 1–2 giorni) all'inizio fino a ottenere un miglioramento.

NB. YES® VM non è adatto per l'uso con il pap test ThinPrep (vedere il sito web).

Attenzione: YES® VM non è un contraccettivo né uno spermicida.

Avvertenza: Se la chiusura di tubo/applicatore è danneggiata o aperta, NON USARE, ma restituire il prodotto dove è stato acquistato. In caso di irritazione o disagio, interrompere l'uso. Se i sintomi persistono, rivolgersi al medico. YES® VM non è compatibile con i preservativi in poliuretano.

LV Latviešu

YES® VM – ilgstošs vaginas mitrinātājs

Produkta apraksts

YES® VM organiskajam mitrinošajam vaginas gēlam uz ūdens bāzes tiek izmantota patentētā tehnoloģija, nodrošinot dabīgu, ilgstošu sausas vaginas glotādās mitrīnāšanu.

Lietošanas norādījumi – YES® VM 100 ml tūbiņā

YES® VM ir paredzēts uzklāšanai ar pirksmeti, vienkārsī uzspiediet miksto želeju uz rokas un ar pirksitu galēm uzliedziet vēlamo daudzumu vaginas audiem. YES® VM var izmantot arī kaunuma lūpu mitrināšanai.

(Applikators nav ieklaugs)

Lietošanas norādījumi – YES® VM aplikatoros

- Sakratiet tūbiņas saturu
- Snūdu lokinu af
- Hægt er að setja stjökuna inn í leggöngin þegar þú sítur, stendur eða liggur, efir persónulegu vali
- Applikatoru var ievietot vaginā, atrodoties sēdus, stāvus vai guļus pozīcijā, atbilstoši savām vēlmēm
- Kad aplikators ir ievietots, vairākas reizes saspiediet tā galu, lai produkts nonāktu dziļi vaginā
- Pēc iztukšošanas turpiniet saspiept aplikatora galu, lai to drošā veidā izņemtu. Neļietot atkārtoti – piesārņojuma risks
- Lūdu, útilīdzjiæt aplikatora tūbiņu un tās korķi, tos pārstrādājot

YES® VM – lietošanas biežums

Lietojot 5 ml ik pēc 2-3 dienām, parasti pietiek, lai uzturētu mitruma līmeni un komforta sajūtu vaginā.

Nodrošina intīmo zonu mitrīnāšanu līdz trim dienām tipiskos maksts atrofijas gadījumos. Izteikti sausuma gadījumā sākmā labvēlīga bīs biežāka lietošana (1 reizi ik pa 1–2 dienām), līdz tiks sasniegti uzlabojums.

NB. YES® VM nav piemērots lietošanai ar ThinPrep Pap uztriepes testu (skatīt vietni).

Brīdinājums: YES® VM nav kontracepcijas līdzeklis vai spermicīds.

Brīdinājums: Ja jebkurus komplektā esošās tūbiņas/aplikatora drošības zīmogojumus ir bojāts vai atvērts, NELIETOJIET to, atgrieziet to iegādes vietā. Ja rodas kairinājums vai diskomforta sajūta, pārtrauciet lietošanu. Ja simptomi neizzūd, meklējiet medicīnisko palīdzību. YES® VM nav sadērgis ar poliuretāna prezervatīviem.

LT Lietuvių

„YES® VM“ – Ilgalaisis makšties drėkiklis

Produktu aprašymas

„YES® VM“ organinis makšties drėkinamasis gelis vandens pagrindu naudoja patentuotą technologiją, kuri suteikia natūralią, ilgalaikę drėgmę išsaugėjusiai nurodies gleivinei.

Vartojimo nurodymai – „YES® VM“100 ml tubelėje

„YES® VM“ tubelėje, pritaikyta tepti gel pirštais, išspauskite minkštą gelį ant rankos ir pirštų galaukais užtepkite norimą kiekį til pafėros onskties madoje pa vaginaln vev. YES® VM kan ogsa brukes til a tilfore kjønssleppene fuktighet. (Applikator medfølger ikke)

Vartojimo instrukcijos – „YES® VM“ aplikatoriuse

- Suplakite tubelės turinį
- Nusukite viršutinę dalį
- Pagal asmeninį poreikį aplikatorių galima įterpti į makštį sėdint, stovint ar gulint
- Når den satt inn, klemmer du på enden av applikatoren flere ganger for å frigjøre produktet høyt opp i skjedene
- Ištušint, toliau spauskite aplikatoriaus galą, kad ji saugiai ištrauktumėte. Nenaudokite pakartotinai – užteršimo pavojus
- Aplikatoriaus tubelę ir viršutinę dalį išmeskite į atnirnių žaliavų surinkimo konteinerį

„YES® VM“ – naudojimo dažnumas

Kas 2–3 dienas tepant 5 ml, paprastai pakanka palaikyti makšties drėgmę ir užtikrint komfortą.

Užtikrina intymią drėgmę iki trijų dienų esant tipiniams makšties atrofijos atvejais. Esant dideliam sausumui, naudinga vartoti dažniau (po 1 kartą kas 1–2 dienas), kol pagerės.

Pastaba. „YES® VM“ netinka naudoti su „ThinPrep Pap“ tepinėlio testu (žr. svetainę).

Perspėjimas: „YES® VM“ nėra nei kontraceptikas, nei spermicidas.

Įspėjimas: Jei uždarytu tubelės / aplikatoriaus sandariklis yra pažeistas arba atidarytas, NENAUDOOKITE, grąžinkite jį perkimo vietai. Jei pajuntate dirginimą ar diskomfortą, nutraukite naudojimą. Jei simptomai išlieka, būtina kreiptis į gydytoją. „YES® VM“ nesuderinamas su poliuretano prezervatyvais.

MT Malti

YES® VM – Moisturiser Vaginali li Jdum

Descrizzjoni tal-prodott

YES® VM gell Vaginali Moisturising organiku bbazaat fuq il-hma juza teknoloġija bbrevettata biex jipprovidi umdiità naturali u fit-tul lill-mukuża nawilżenie błony sluzowej pochwy.

Istruzzjonijiet għall-użu – YES® VM f'tubu ta' 100ml

YES® VM f'tubu huwa ddisinjat għall-applikazzjoni bis-swaba, sempliċement aghfas il-gel artab fuq idejk u uża l-ponot ta' subghajk biex tappikka l-hammont mixtieg fuq it-tessuti vaginali. YES® VM jista' jintuża wkoll biex jiġu idratati l-labja. (Lebda applicatur mhu inkluz)

Istruzzjonijiet għall-użu – YES® VM f'Applikaturi

- Flawwad l' isfel il-kontenut tat-tubu
- Dawwar u nehki l-parti ta' fuq
- L-applikatur jista' jiddahhal fil-vagina meta tkun bilqiegħda, bilwieqfa jew mimduđa, skont il-preferenza personali
- Ladarba jiddahhal, aghfas it-tarf tal-applikatur diversi drabi biex tirrakxa l-prodott ġewwa sew fil-vagina
- Meta jittabtal, kompli aghfas it-tarf tal-applikatur biex toħroġ minghajr periklu. Terġax tużah – Riskju ta' Kontaminazzjoni
- Jekk jogħġbok armi t-tubu tal-applikatur u l-bičca ta' fuq għar-riċiklaġġ

YES® VM – frekwenza ta- użu

Applikazzjoni ta' 5ml użata kull jumejn sa tlett ijiem, hija tipikament biżżejjta biex iżzomm il-vagina niedja u komda.

Jipprovidi umdiità intima sa tlett ijiem f'kazijiet tipici ta' atrofija vaginali.

Kazijiet ta' niġfa severa jibbenefikaw minn użu aktar frekwenti (applikazzjoni wahda kull jum sa jumejn) injalmzent sakemm jinkiseb titjib.

N.B. YES® VM mhuwiex adattat għall-użu mal-ismear test. ThinPrep Pap (patrz strona internetowa).

Attenzjoni: YES® VM mhuwiex kontraċettiv jew spermicida.

Twissja: Jekk is-sigill oriċarju tubu/applikatur maġhluq iġkun bil-hsara jew miftuħ TUŻAHX, u rritornah fil-post fejn xtrajtu. Jekk inkun hemm irritazzjoni jew skumdiità, tkomplix tużah. Jekk is-sintomi jipperstistu idrobb parir mediku. YES® VM mhux kompatibbil mal-kondom ta'-polyurethane.

NO Norsk

YES® VM – langvarig vaginal fuktighetskrem

Produktbeskrivelse

YES® VM er en vannbasert og økologisk vaginal fuktighetsgelé som benytter en patentert teknologi for å gi naturlig og langvarig fuktighet til tørre vaginale slimhinner.

Bruksanvisning – YES® VM i tube på 100 ml

YES® VM på tube er laget for å påføres med fingrene. Bare klem til den myke gelen på hånden og bruk fingerspene til å påføre ønsket mengde på vaginalt vev. YES® VM kan også brukes til å tilføre kjønssleppene fuktighet. (Applikator medfølger ikke)

Bruksanvisning – YES® VM i applikatorer

- Rist tuben slik at innholdet havner nedest
- Rodar e retirar o topo
- Applikatoren kan føres inn i skjedene når du sitter, står eller ligger – alt etter hva du foretrekker
- Når den satt inn, klemmer du på enden av applikatoren flere ganger for å frigjøre produktet høyt opp i skjedene
- Når den er tørt, fortsetter du å klemme på enden av applikatoren for å trekke den ut på en trygg måte. Må ikke gjenbrukes – fare for kontaminering
- Kast applikator-tuben og toppen med resirkulerbart avfall